

ライフ ウェーブ 社

創業2004年11月 カリフォルニア州サンディエゴに本社を置き、
アメリカとアイルランドに自社工場を持ち世界100ヵ国以上に
20の言語で光線療法技術のフォトセラピーパッチの販売を行っています。

**このたび医療機器として輸入許可を取得し、
日本国内での販売が可能になりました。**

100以上の特許と80以上の製品エビデンス！

特許について

ライフウェーブ社は長年にわたって多数の特許を取得しており、これは製品開発・革新へのコミットメントの表れです。
2013年と2014年に光線療法パッチ技術に関する2つの連続した特許が発行されました。
2年後に受賞した“Theta OneおよびTheta Activate栄養処方”というもう1つの画期的な特許も取得しました。これから
も、さらに真摯な研究を進め、新たな特許取得を達成してまいります。



12年間に及ぶ審査を経て、米国特許商標庁はウェアラブル生体分子装
置・医療機器としてライフウェーブテクノロジーに特許を発行しました。

※ライフウェーブ社の科学と研究・特許についての詳細は下記ホームページの「科学と研究」の頁でご確認することができます。

以下からアクセスしてご覧ください。

<https://www.lifewave.com/corporphan/home/science>

光線療法(フォトセラピー)とは

光線療法(フォトセラピー)とは特定の光の周波数が体内で特定の変化を引き起こすことで身体の機能を改善・治療する療法の
ことです。ライフウェーブの技術は、ナノクリスタル結晶等からなるパッチを使用する高度な光線療法です。体温にさらされると、
パッチは特定の波長の光の周波数を放射し、人体の特定の神経と皮膚の経穴(ツボ)を活性化します。ライフウェーブのパッ
チは貼るとすぐに機能し始め、電源として体温を利用する世界で唯一の光線療法製品で、電池も電子機器も必要ありません。



体温がパッチ内部のナノクリスタルを活性化させ、その後パッチは光を反射し経穴(ツボ)を通して経路を刺激します。



パッチに覆われた部分は身体から発光された赤外線を体外に出さないように光を反射させます。また体内の奥へと戻った光の周波数は細胞に戻り、脳に特定の場所をさらに刺激させます。



そうすると脳は自身の自然エネルギーの流れ(気血)を整え、自分自身で治療するように指令を出します。



鍼灸治療等の経穴(ツボ)に向けて使用する光線療法(フォトセラピー)は、無数の健康上の利点を提供します。当社のフォトセラピー・パッチは、薬物、興奮剤、または鍼等を身体に必要としません。

このフォトセラピー・パッチは肌に直接貼ったり、服に貼ることで体温により発動し光の周波数を送る仕組みなので、**身体に薬物・化学物質・興奮剤等を取り込むことはありません。**他の経皮パッチが薬物成分や刺激興奮剤を肌から体内へ送り込むのに対して、当社のパッチは何も体内に入れない非経皮パッチであるので副作用がありません。**世界及び米国アンチドーピング機構、NCAAやオリンピック委員会で試験し安全が確認されており、多くの五輪選手、プロ・アスリートに愛用されています。**

また、このパッチは、鍼を使うことなく、特定の光周波数で経路(ツボ)を刺激することで、鍼治療と同じような体感を得ることができます。特定の光周波数が身体に良い影響を与えることは昔から知られていますが、例えば太陽光が身体を刺激し体内でビタミンDが生成されるといった具合にです。体内に存在する様々な経路(ツボ)を、それぞれ特有の光周波数で刺激することで体内栄養素とエネルギーを自然生成させると共に、エネルギー循環のバランスを改善し、自己治癒力を高めます。

幹細胞とはなにか？


- ・ 分裂して自分と同じ細胞を作る（自己複製能）
- ・ 複数の種類の細胞を作り出す

※通常、幹細胞は20歳を頂点に活動が鈍くなり、老化現象が始まる。さらに60歳で急激に活動が低下。

細胞を再び生み出し補充できる！


肌の再生
髪や爪が伸びる
傷が治る
骨折が治る
などなど

全て幹細胞
のおかげ

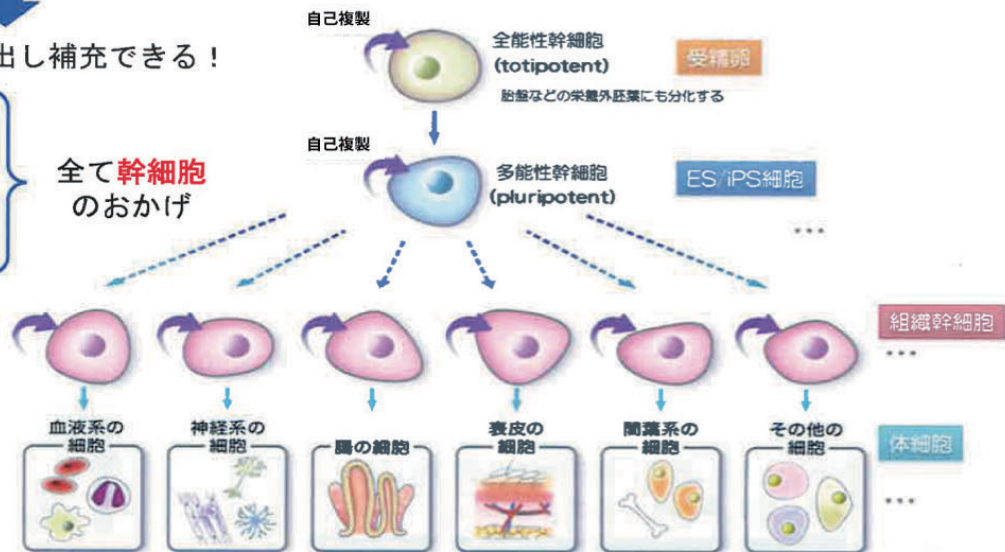

人間の体細胞はおよそ60兆個ともいわれますが、ケガや病気、炎症などのアクシデントが起こると本来の寿命よりも早く体細胞は死を迎え、これは幹細胞の出番が増え、幹細胞がより多く使われることを意味します。なので、ケガや病気などが多い人は、幹細胞が消耗してその数が少なくなっていくと考えられるのです。

幹細胞数

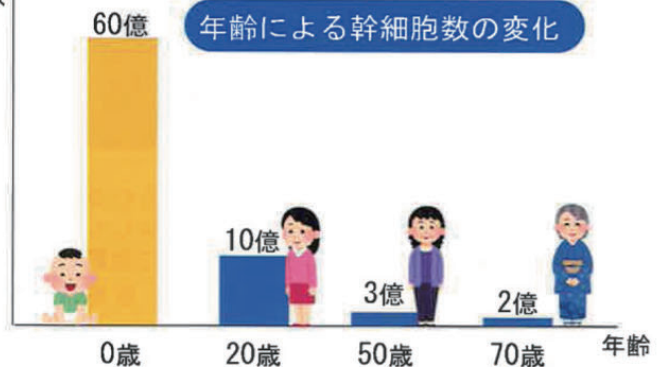

すべての幹細胞が活性すれば、臓器も周期的に生まれ変わる！

20歳ごろの各臓器等の生まれ変わる周期

皮膚：30日	
血液：約120日	
骨：3～5年	
筋肉：約半年	
脳細胞：約1年	
肝臓・腎臓：約1年	
胃粘膜：3日	
腸微絨毛：1日	

例えば・・・

若いころは皮膚の幹細胞が活発に働き、30日周期で皮膚が生まれ変わります（ターンオーバー）。

しかし老化に伴い皮膚幹細胞が衰退しターンオーバーが遅くなりシミ・シワがでやすくなります。また、幹細胞の使われ方に差があるため、若さや寿命に差が出てきます

もし、すべての幹細胞が活発に働くと、左図のような日数で骨や筋肉、内臓や脳細胞などのすべての臓器がリニューアルする可能性があるのです。

Life Wave 製品一覧 小売価格

※各パッチは、鍼灸と同様にツボを刺激する一般医療器具です。()はオートシップ会員価格。

エナジー エンハンサー Energy Enhancer Patches	アイス ウェーブ IceWave Patches	ナイト ウェーブ NightWave Patches
 体感数秒 スポーツを更に積極的に楽しみたい方にお勧め ¥10,700 (¥8,300) 55BV	 体感数秒 全身・局所的な疲労痛でお悩みの方にお勧め ¥10,700 (¥8,300) 55BV	 体感一晚 良質な睡眠をお望みの方にお勧め ¥10,700 (¥8,300) 55BV

※各製品の説明書に掲載されているツボに貼ってご使用ください

Y エイジ カルノシン Y-Age Carnosine Patches	Y エイジ グルタチオン Y-Age Glutathione Patches	Y エイジ イオン Y-Age Aeon Patches
 体感一晚 スタミナ不足・骨密度筋肉量・記憶力が気になる方にお勧め ¥10,700 (¥8,300) 55BV	 体感一晚 体に溜まった毒素や重金属が気になる方にお勧め ¥10,700 (¥8,300) 55BV	 体感数分 精神的・神経的な悩みを我慢できない方にお勧め ¥10,700 (¥8,300) 55BV

※ライフ・ウェーブ製品は、薬物を一切使用していません

SP6 コンプリート SP6 Complete Patches	アラビダ パッチ Alavida Patches	X39 Stem Cells Patches
 体感数週 食べることを我慢できない方や体型が気になる方にお勧め ¥10,700 (¥8,300) 55BV	 体感数分 お肌の老化現象や気力喪失でお悩みの方にお勧め ¥10,700 (¥8,300) 55BV	 パッチ 2 個分でカウント 体感数秒 身体的老化現象が気になる全ての方にお勧め ¥17,500 (¥12,000) 77BV

※体感には、目的によって個人差があります。

アラビダ レジェンダリートリオ Alavida Regenerating Trio	Y エイジ システムキット Y-Age System Kit	Enrollment Starter スターター登録
 パッチ 3 個分でカウント 肌の健康を内側からも外側からも応援します アラビダパッチ 2 個付き ¥23,800 (¥17,800) 119BV	 追加注文品 1 Y-Age Aeon、 1 Y-Age Glutathione、 1 Y-Age Carnosine ¥32,100 (¥17,800) 117BV	 会員登録 (登録のみ・年会費無し) ¥ 3,000

※表示価格は税別価格 ※計算方法：(製品金額+¥950 送料) × 消費税=支払合計金額



一般医療器具 ツボ押しパッチの使用方法

(東洋医学の鍼灸の各ツボに貼って下さい)

パッチは 12 時間使用後破棄し、細胞を 12 時間休めて下さい。24 時間の連続使用は NG です



X39
日中・睡眠時
基本は日中

X39 は、全ての幹細胞に刺激を与えるよう頸椎（ケイツイ）・下丹田または経絡に貼って下さい。

又は、痛みの在る所に直接貼っても OK です。場合によっては一回に 2～3 ヶ所貼っても構いません。身体の様子を見て貼る位置や枚数を調整して下さい。

(通常 1 枚を使用)



頸椎



下丹田



全身の経絡

X39
X サンキュー

X39 は全ての基本製品です！ 更に効果を求める際は他のパッチも併用ください



アイス
日中・睡眠時
基本は日中

アイスは痛みの有る所に貼って下さい。その部位によってツボが違いますので先ず順番に下図を参照しシールを剥がさずに 10 秒間あて痛みが緩和しない時は次のステップを試し一番効果を実感できるツボを探してから貼って下さい。

頭・首・肩・腰・膝・同時に貼っても OK です。(茶色と白色パッチの 2 枚を使用)

クロック/クロス法
肩の痛み →



クロック/クロス法
頭痛 →



クロック/クロス法
全身の痛み →



クロック/クロス法
膝痛 →



背中痛 →

クロック/クロス法
腰痛 →



腰痛 →
足まで痛みが広がっている時
茶色を腰・白を足に



ツボ押しパッチには、薬剤などは一切入っていません。何種類かのパッチを同時に貼っても OK！

パッチ使用中は、水分をこまめに摂ってください。より効果が高まります。



エナジー
日中

運動や試合の 30 分前に両胸のツボに貼って下さい。血糖値が気になる方やダイエット希望の方は、わき腹に茶色を左側、白を右側に貼って下さい。
(茶色と白色パッチの 2 枚を使用)



グルタチオン
日中・睡眠時

便秘や内臓系でお悩みの方は、丹田に貼ってお試ください。
呼吸器系でお悩みの方は、喉に貼ってお試ください。
場合によっては、その部位を囲むように一度に 2～3 枚を貼って様子を見て下さい。
通常、予防の為に貼る際は週の内の連続した 2～3 日貼って下さい。



カルノシン
日中・睡眠時

骨密度・筋肉量・痴呆・心臓などが気になる方用のツボです。



イオン
日中・睡眠時

神経系の痛み・ストレス・鬱が気になる方用のツボです。



ナイト
睡眠時

睡眠の質が気になる方用のツボです。



SP6 : 日中

食欲抑制のツボに貼って下さい。
左足に貼って下さい。
ダイエット希望の方は、更に「エナジー」を併用して下さい。



アラビダ
睡眠時

ミトコンドリア・コラーゲンが
増殖するツボに貼って下さい。



内からも外からもお肌を綺麗に
アラビダパッチと是非お使い下さい
アラビダ デイ&ナイトクリーム

朝：デイクリームを 1 プッシュ
ナイトクリームを 1 プッシュ
夜：ナイトクリームを 2 プッシュ



会社の成り立ちを
含む概要

18分51秒



アメリカの
ニュース番組

10分15秒



X39 について
開発者からの
コメント

18分28秒

→ エナジーハンサー
説明動画

2分45秒



→ アイスウェーブ
説明動画

5分02秒



→ カルノシン
説明動画

58秒



→ グルタチオン
説明動画

1分47秒

